



2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Боковое ограждение (2 штуки)

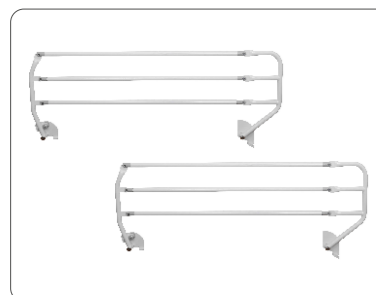

Матрац в чехле из винилскожи

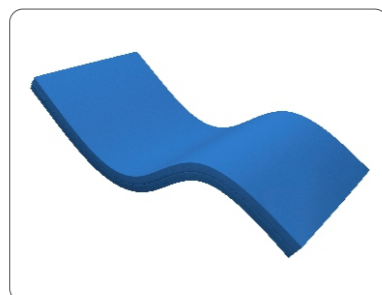

Матрац в чехле из мембранной ткани



Матрац четырёхсекционный

Карман для истории болезни пациента
Переключик складной
Приспособление для мытья пациентов
Приспособление для удлинения ложа кровати
Дополнительная секция матраца
Рама Балканского
Ремень фиксирующий (комплект)
Столик для питания
Штатив для вливаний

3 ЦВЕТОВАЯ ГАММА НРЛ-ПЛАСТИКА

СТАНДАРТНАЯ



3932, 3934 Серый

ПОД ЗАКАЗ



1111/S Белый



1055/V Ваниль



1248/6 Ярко-жёлтый



1062/6 Жёлтый



1023/6 Светло бирюзовый



1243/6 Салатовый



1018/6 Бирюза



1040/6 Голубой

4 КОНТАКТЫ



Позвоните нам по телефону +7 (831) 774-80-30
Работаем с 08:00 до 16:40 (МСК), без перерыва на обед
Выходные дни: суббота и воскресенье



Напишите письмо и отправьте на welcome@dzmo.ru




Оформите заказ на www.dzmo.ru



Оформите заказ у нашего Партнёра
Контактные данные наших Партнёров в Вашем
регионе узнайте по телефону +7 (831) 774-80-30



Улыбнитесь!

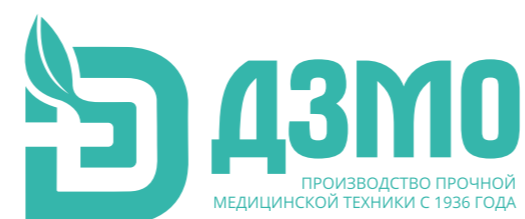

Кровать медицинская многофункциональная
электрическая К-ДЗМО-3-4-Э



Высота ложа регулируется электроприводом в диапазоне от 580 до 860 мм при нажатии на кнопки ручного пульта управления




Кровать устанавливается в положение «Тренделенбург» для профилактики тромбозов, при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок), признаках кровотечения из желудочно-кишечного тракта



Кровать устанавливается в положение «АнтиТренделенбург» для улучшения венозного дренажа от головы и шеи, уменьшения внутричерепного давления, уменьшения риска пассивной аспирации






Четырёхсекционное ложе из стальной сетки сечением 5 мм с ячейкой 50x50 мм выдерживает нагрузку до 260 кг

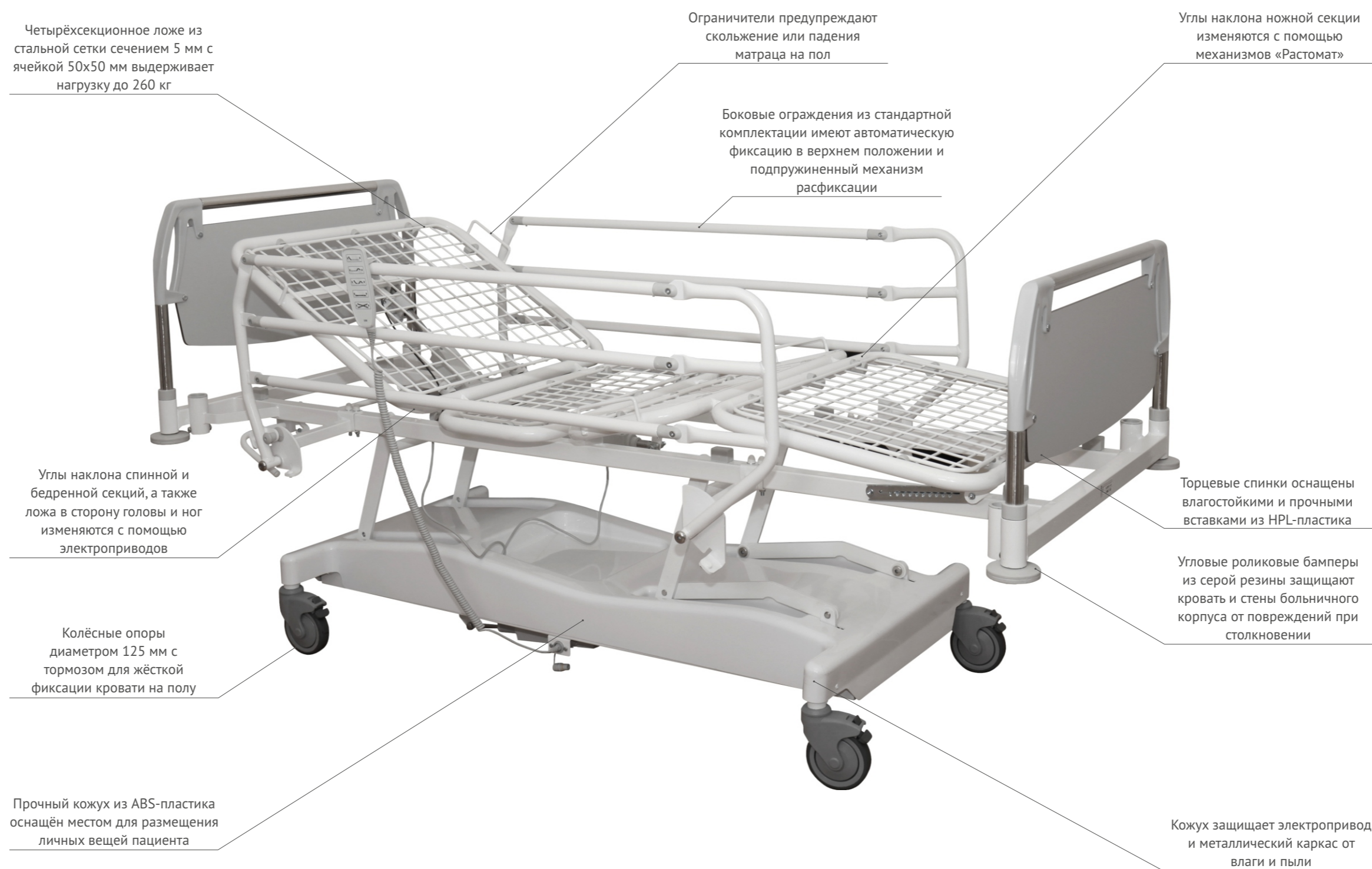


Вариант исполнения ложа кровати - из съёмного перфорированного ABS-пластика



Кровать может быть оборудована центральной тормозной системой с фиксацией направления движения (опция)

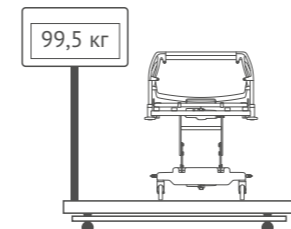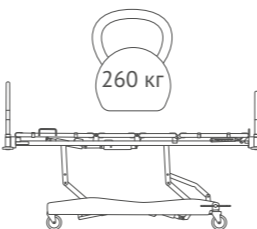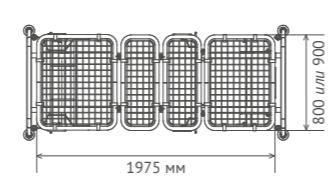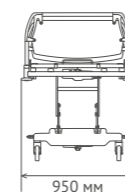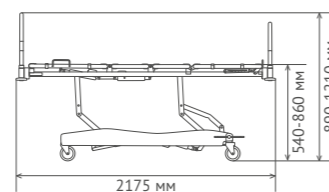


Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм

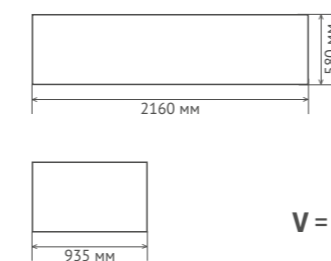

$V = 1,17 \text{ м}^3$

Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм

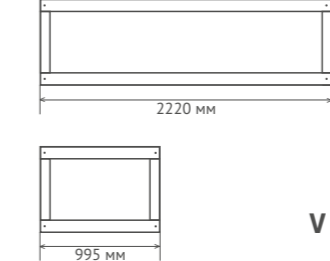

$V = 1,41 \text{ м}^3$



РУ № РЗН 2020/12587 от 18.11.2020г.



Гарантийный срок 12 месяцев

Нужна более подробная информация?



Перейдите на dzmo.ru



Смотрите видео на YouTube