



## 2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Боковое ограждение (2 штуки)

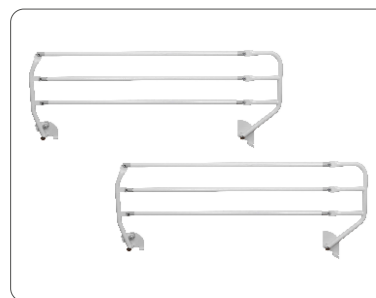

Матрац в чехле из винилскожи

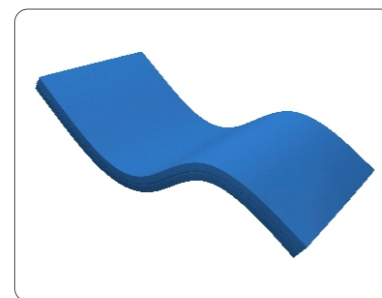

Матрац в чехле из мембранной ткани



Матрац четырёхсекционный

Карман для истории болезни пациента  
Переключик складной  
Приспособление для мытья пациентов  
Приспособление для удлинения ложа кровати  
Дополнительная секция матраца  
Рама Балканского  
Ремень фиксирующий (комплект)  
Столик для питания  
Штатив для вливаний

## 3 ЦВЕТОВАЯ ГАММА НРЛ-ПЛАСТИКА

### СТАНДАРТНАЯ



3932, 3934 Серый

### ПОД ЗАКАЗ



1111/S Белый



1055/V Ваниль



1248/6 Ярко-жёлтый



1062/6 Жёлтый



1023/6 Светло бирюзовый



1243/6 Салатовый



1018/6 Бирюза



1040/6 Голубой

## 4 КОНТАКТЫ



Позвоните нам по телефону +7 (831) 774-80-30  
Работаем с 08:00 до 16:40 (МСК), без перерыва на обед  
Выходные дни: суббота и воскресенье



Напишите письмо и отправьте на [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru)




Оформите заказ на [www.dzmo.ru](http://www.dzmo.ru)



Оформите заказ у нашего Партнёра  
Контактные данные наших Партнёров в Вашем  
регионе узнайте по телефону +7 (831) 774-80-30



Улыбнитесь!

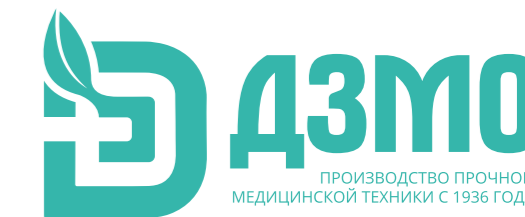

Кровать медицинская многофункциональная  
механическая К-ДЗМО-2-4-Г



Высота ложа регулируется гидроприводом в диапазоне от 580 до 860 мм при нажатии на ножную педаль



Кровать устанавливается в положение «Тренделенбург» для профилактики тромбозов, при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок), признаках кровотечения из желудочно-кишечного тракта



Кровать устанавливается в положение «АнтиТренделенбург» для улучшения венозного дренажа от головы и шеи, уменьшения внутричерепного давления, уменьшения риска пассивной аспирации

Четырёхсекционное ложе из стальной сетки сечением 5 мм с ячейкой 50x50 мм выдерживает нагрузку до 260 кг

Углы наклона спинной и бедренной секций, а также ложа в сторону головы и ног изменяются с помощью газовых пружин

Колёсные опоры диаметром 150 мм с тормозом для жёсткой фиксации кровати на полу

Прочный кожух из ABS-пластика оснащён местом для размещения личных вещей пациента и местом для установки кислородного баллона

Ограничители предупреждают скольжение или падения матраца на пол

Углы наклона ножной секции изменяются с помощью механизмов «Растомат»

Торцевые спинки оснащены влагостойкими и прочными вставками из HPL-пластика

Угловые роликовые бамперы из серой резины защищают кровать и стены больничного корпуса от повреждений при столкновении

Возможно исполнение ложа из литого перфорированного ABS-пластика






Кровать может быть оборудована центральной тормозной системой с фиксацией направления движения (опция)




Кровать устанавливается в положение «Кардиологическое кресло» для увеличения жизненной активности лёгких и улучшения дыхания пациента



Боковые ограждения в нижнем положении не выходят за габариты ложа для безопасного перекладывания пациента с кровати на тележку

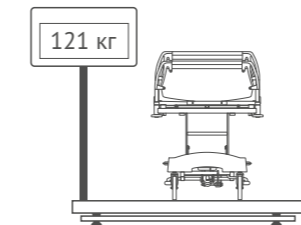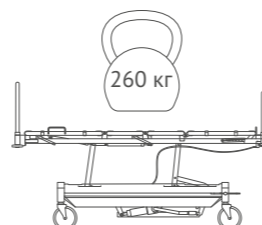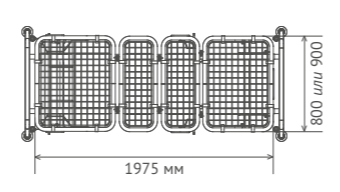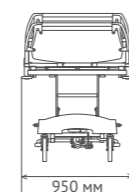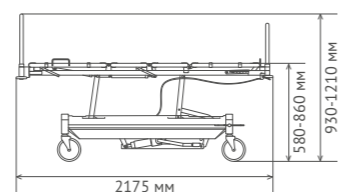


Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм

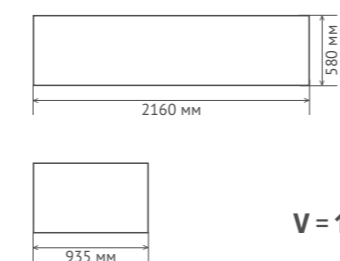

$V = 1,17 \text{ м}^3$

Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм

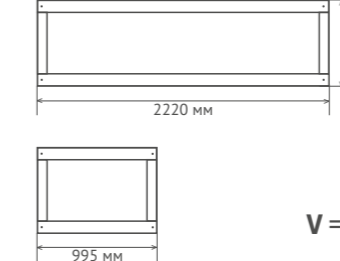

$V = 1,41 \text{ м}^3$



РУ № РЗН 2020/12149 от 02.10.2020г.



Гарантийный срок 12 месяцев

Нужна более подробная информация?



Перейдите на dzmo.ru



Смотрите видео на YouTube