



2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Боковое ограждение (2 штуки)

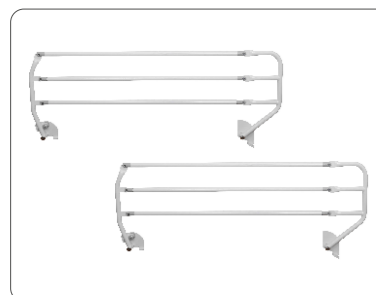

Матрац в чехле из винилскожи

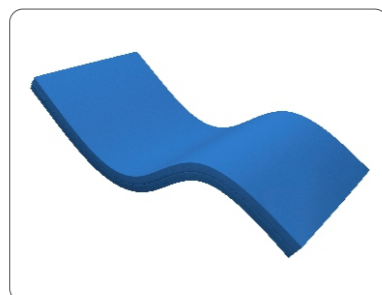

Матрац в чехле из мембранной ткани



Матрац четырёхсекционный

Карман для истории болезни пациента
Перекладчик складной
Приспособление для мытья пациентов
Приспособление для удлинения ложа кровати
Дополнительная секция матраца
Рама Балканского
Ремень фиксирующий (комплект)
Столик для питания
Штатив для вливаний

3 ЦВЕТОВАЯ ГАММА НРЛ-ПЛАСТИКА

СТАНДАРТНАЯ



3932, 3934 Серый

ПОД ЗАКАЗ



1111/С Белый

1055/У Ваниль

1248/6 Ярко-жёлтый

1062/6 Жёлтый



1023/6 Светло бирюзовый

1243/6 Салатовый

1018/6 Бирюза

1040/6 Голубой

4 КОНТАКТЫ



Позвоните нам по телефону +7 (831) 774-80-30
Работаем с 08:00 до 16:40 (МСК), без перерыва на обед
Выходные дни: суббота и воскресенье



Напишите письмо и отправьте на welcome@dzmo.ru





Оформите заказ на www.dzmo.ru



Оформите заказ у нашего **Партнёра**
Контактные данные наших Партнёров в Вашем
регионе узнайте по телефону +7 (831) 774-80-30



Улыбнитесь!

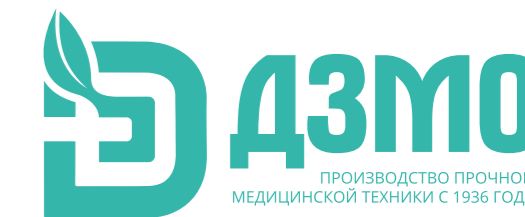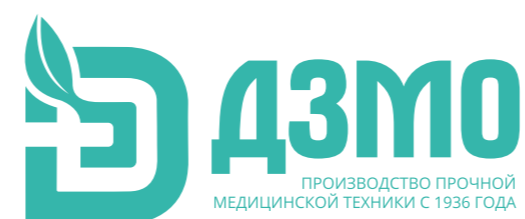

Кровати медицинские многофункциональные механические
К-ДЗМО-1-2-Р, К-ДЗМО-1-2-В, К-ДЗМО-1-2-Г



Оптимальная высота ложа (545 мм) обеспечивает лёгкость расположения на кровати пациентам с низким ростом или пожилого возраста



Для проведения реанимационных мероприятий спинки мгновенно снимаются с каркаса кровати



Для качественной санитарной обработки кровати сетки ложа - съёмные

Углы наклона спинной секции регулируются **пластиковыми гребёнками, винтом** или **газовыми пружинами**

Ограничители предупреждают скольжение или падение матраца на пол

Двухсекционное ложе выполнено из стальной сетки сечением 5 мм с ячейкой 50x50мм



Пластиковые держатели надёжно фиксируют съёмные сетки ложа на металлическом каркасе

Разборная конструкция кровати позволяет экономить на транспортных расходах

Две колёсные опоры оснащены тормозом для жёсткой фиксации кровати на полу

Вставки торцевых спинок выполнены из прочного, влагостойкого HPL-пластика

Угловые роликовые бамперы из серой резины защищают кровать и стены больничного корпуса от механических повреждений при столкновении






Колёсные опоры диаметром 125 мм делают кровать маневренной и бесшумной при транспортировке



Поднятая спинная секция позволяет придать пациенту удобное положение «Полусидя»



Для комфортного расположения пациента, кровать комплектуется мягким матрацем по отдельному заказу

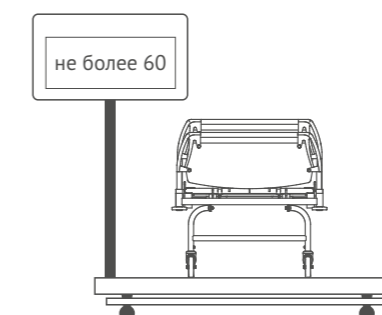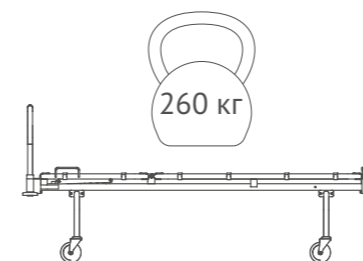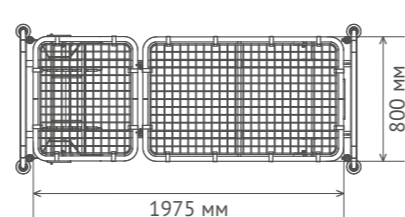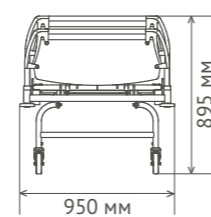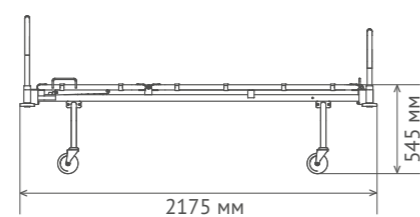

РУ № РЗН 2020/12149 от 02.10.2020г.

Гарантийный срок **12 месяцев**

Нужна более подробная информация?



Перейдите на dzmo.ru
(К-ДЭМО-1-2-Р)



Смотрите видео на YouTube
(К-ДЭМО-1-2-Р)